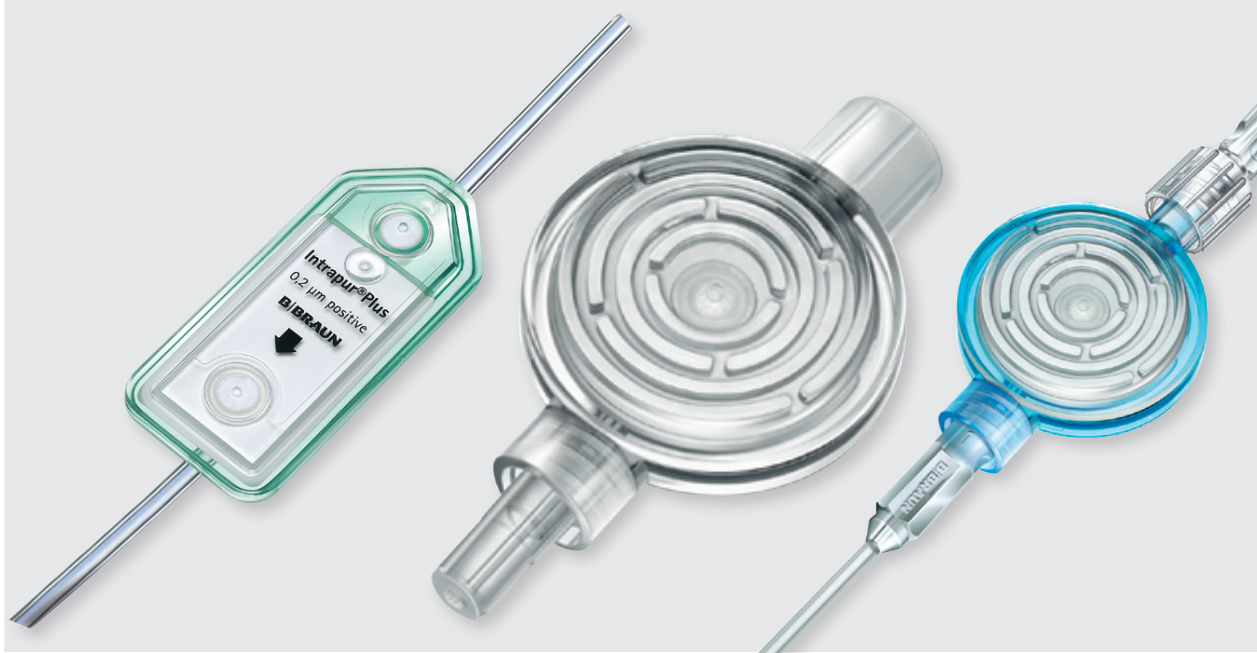


Intrapur[®] IV-filter Sterifix[®] IV-filter




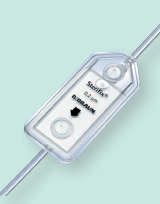


IV tilbehør



Intrapur[®] IV-filter 0,2 µm

Sterifix[®] IV-filter 0,2 µm

IV tilbehør




| | Produkttype | Fyllevolum inkl. slange | Artikkelnr |
|---|--|-------------------------|--|
|  | Intrapur Plus: Infusjonsfilter med 0,2 µm positivt ladet membran Retensjon av bakterier, partikler, endotoxiner. Lufteliminering Brukstid: 96t Filteroverflate: 10 cm ² Væskestrøm: ~30 ml/min | 3,46 ml | PVC slange: 4099800 PVC-fri slange: 4183916 |
|  | Intrapur Paed: Infusjonsfilter med 0,2 µm positivt ladet membran Retensjon av bakterier, partikler, endotoxiner. Lufteliminering Brukstid: 96t Filteroverflate: 4,5 cm ² Væskestrøm: ~10 ml/min | 1,19 ml | 4099753 |
|  | Intrapur Neonat: Infusjonsfilter med 0,2 µm positivt ladet membran Retensjon av bakterier, partikler, endotoxiner. Lufteliminering Brukstid: 96t Filteroverflate: 1,65 cm ² Væskestrøm: ~3 ml/min | 0,76 ml 0,68 ml | PVC-fri slange 15+5 cm: 4099451 PVC-fri slange 5+5 cm 4185226 |
|  | Sterifix: Infusjonsfilter med 0,2 µm uladet membran Retensjon av bakterier, partikler. Lufteliminering Brukstid: 24t Filteroverflate: 10 cm ² Væskestrøm: ~30 ml/min | 3,46 ml | PVC slange: 4099303 PVC-fri slange: 4184637 |
|  | Sterifix Paed: Infusjonsfilter med 0,2 µm uladet membran Retensjon av bakterier, partikler. Lufteliminering Brukstid: 24t Filteroverflate: 4,5 cm ² Væskestrøm: ~10 ml/min | 0,7 ml Uten slange | 4099354 |
|  | Sterifix Neonat: Infusjonsfilter med 0,2 µm uladet membran Retensjon av bakterier, partikler. Lufteliminering Brukstid: 24t Filteroverflate: 1,65 cm ² Væskestrøm: ~2 ml/min | 0,76 ml | 4099257 |

Salgsenhet: 50 stk. Art.nr. 4185226: 100 stk.
 Membran væskefilter: SUPOR polyethersulfon, hydrofilt.

Pga liten filteroverflate og derved stor motstand i Neonatfilterne, vil hyppige mottryksalarmer kunne oppstå ved høy infusjonshastighet på pumper (eks. innsovningsdose v/TIVA eller bolusinfusjoner).

Intrapur[®] IV-filter 1,2 µm

IV tilbehør

| | Produkttype | Fyllevolum inkl. slange | Artikkelnr |
|---|---|-------------------------|------------|
|  | Intrapur Lipid: Lipidfilter med 1,2 µm uladet membran Retensjon av sopp, sporer, partikler. Lufteliminering Brukstid: 24t Filteroverflate: 10 cm ² Væskestrøm: ~100 ml/min | 3,46 ml | 4099702 |
|  | Intrapur Paed Lipid: Lipidfilter med 1,2 µm uladet membran Retensjon av sopp, sporer, partikler. Lufteliminering Brukstid: 24t Filteroverflate: 4,5 cm ² Væskestrøm: ~90 ml/min | 1,19 ml | 4099850 |
|  | Intrapur Neonat Lipid: Lipidfilter med 1,2 µm uladet membran Retensjon av sopp, sporer, partikler. Lufteliminering Brukstid: 24t Filteroverflate: 1,65 cm ² Væskestrøm: ~30 ml/min | 0,76 ml | 4099460 |

Salgsenhet: 50 stk.

Membran væskefilter: SUPOR polyethersulfon, hydrofilt.

Pga liten filteroverflate og derved stor motstand i Neonatfilterne, vil hyppige mottryksalarmer kunne oppstå ved høy infusjonshastighet på pumper (eks. innsovningsdose v/TIVA eller bolusinfusjoner).

